

FiNC Smart Scale

基本的な使い方



本体ディスプレイ表示説明



「WoLN」アプリとの連携



※スマートフォンのBluetoothをオンに設定してください



「きろく」を
タップします。



「体重」「手動入力」
をタップします。



「FiNC Smart Scale」
を選択したあと
右下の $+$ を押します。



この画面の時にFiNC
Smart Scaleに乗って
測定してください。



「データを保存する」
をタップします。



「OK」をタップします。



FiNC Smart Scaleで
計測した数値を
表示します。



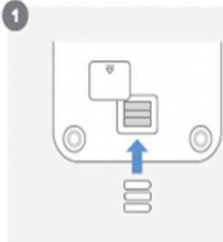
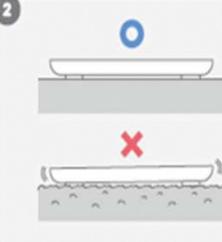
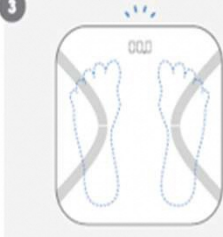
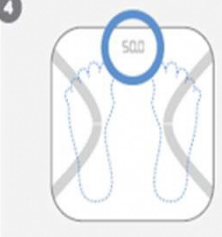
「すべてのデータ」に
骨格筋、骨量、水分量、
内臓脂肪レベルなど
表示します。

FiNC体組成計の使い方や詳細の設定方法については、
右のQRコードからユーザーズガイドをご参照ください。



FiNC Smart Scale

基本的な使い方

	本体裏面から 単4電池3本を入れる
	本体を水平な 固い床に置く (畳、カーペット などでは正しく計測 できません)
	体組成計に乗ると 自動で電源が入ります (素足以外では正しく 計測されません)
	本体に体重が 表示されます (本体から降りると自 動で電源が切れます)

本体ディスプレイ表示説明

	(表示なし)	
正常	電源が入っていない 電池残量がなくなった	Bluetoothが ペアリングしていない ※スマートフォンの Bluetoothをオンに設定し てください
		
低電力	過負荷	準備中 表示が出てから乗る

FiNC体組成計の使い方や詳細の設定方法については、
右のQRコードからユーザーズガイドをご参照ください。



FiNC Smart Scale

「WoLN」アプリとの連携



「きろく」を
タップします。



「体重」「手動入力」
をタップします。



「FiNC Smart Scale」
を選択したあと
右下の を押します。



この画面の時にFiNC
Smart Scaleに乗って
測定してください。



「データを保存する」
をタップします。



「OK」をタップします。



FiNC Smart Scaleで
計測した数値を
表示します。



「すべてのデータ」に
骨格筋、骨量、水分量、
内臓脂肪レベルなど
表示します。